



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Centro de Ciencias Básicas.

Departamento de Matemáticas y Física.

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.

Práctica 4.

Microscopio Compuesto.

Óptica.

Prof. Mariana Alfaro Gómez.

Alumnos:

Carlos Francisco Guzmán Barba.

Erick Ignacio Rodríguez Juárez.

Manuel Alejandro Siller Landin.

Realización: 28/03/22.

Entrega: 11/04/22.

1 RESUMEN.

Para esta práctica se construyó, mediante dos lentes convergentes de distinta distancia focal, un artefacto denominado microscopio, el cual nos permite visualizar los objetos que se enfoquen con éste de manera ampliificada, es decir, que la magnificación total del objeto (en valor absoluto) sea mayor a uno. Para ello se estimó, tanto de manera práctica como teórica, la magnificación de un objeto con este microscopio, obteniéndose que la diferencia entre el valor práctico y el valor teórico de dicha magnificación total era de 0.4453 ± 0.0464 , lo que confirma entonces que este instrumento óptico permite ampliar los objetos en la manera que sea necesaria, siempre y cuando se comprenda el funcionamiento de las lentes delgadas de modo que, combinándolas correctamente, se obtenga el aumento de la imagen deseada.

2 INTRODUCCIÓN.

2.1 — Lentes Individuales —

Recordemos que la imagen producida por un objeto en una lente convergente queda completamente determinada por dos rayos. El rayo que pasa por el centro de la lente (sin desviarse) y el que es paralelo al eje óptico y es colimado al pasar por el foco F_i del lado opuesto. En la Figura 1 (obtenida de [1]), se tiene el objeto ubicado entre el foco F_o y la lente, entonces la imagen producida será virtual y vertical.

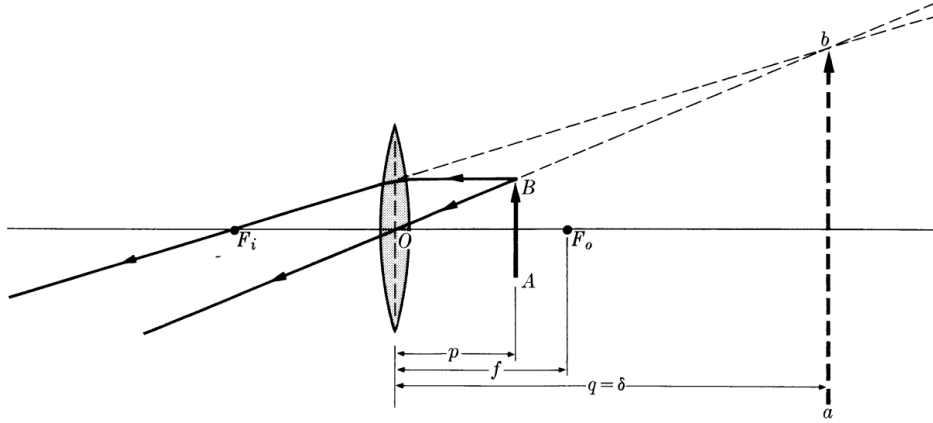


Figura 1: Trazo de rayos de una lente convergente, el objeto entre el foco y la lente.

Recordemos que, por la definición de *magnificación*, obtenemos $M = \frac{ab}{AB}$. Notar que ambos triángulos comparten el mismo ángulo en el punto O, entonces $M = q/p$, y con la notación $d_o = p$, $-d_i = q$, obtenemos

$$M = -\frac{d_i}{d_o}. \quad (1)$$

Así, modificando la posición de la lente, se modificará la magnificación por (1). Obsérvese que las distancias objeto e imagen satisfacen lo siguiente.

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}. \quad (2)$$

Esto dice que, si $d_o = f$, entonces $d_i = \infty$. Y por tanto, $M = \infty$. Entonces la imagen (virtual) será mayor cuando el objeto se acerque al foco F_o de la lente, puesto que las líneas punteadas delgadas (de la Figura 1) serán paralelas, cuando el segmento AB pase por F_o .

2.2 — Microscopio Compuesto —

Un **microscopio compuesto** es un sistema de dos lentes (objetivo y ocular) que producen una imagen virtual aumentada e invertida de un objeto pequeño, así como lo indica la Figura 2 (también obtenida de [1]).

La lente objetivo, al colocarse su foco F_o por delante del objeto AB, produce una imagen invertida y real. Mientras que la lente ocular, al tener la imagen $a'b'$ producida por la lente objetivo, como objeto, se encuentra en la situación

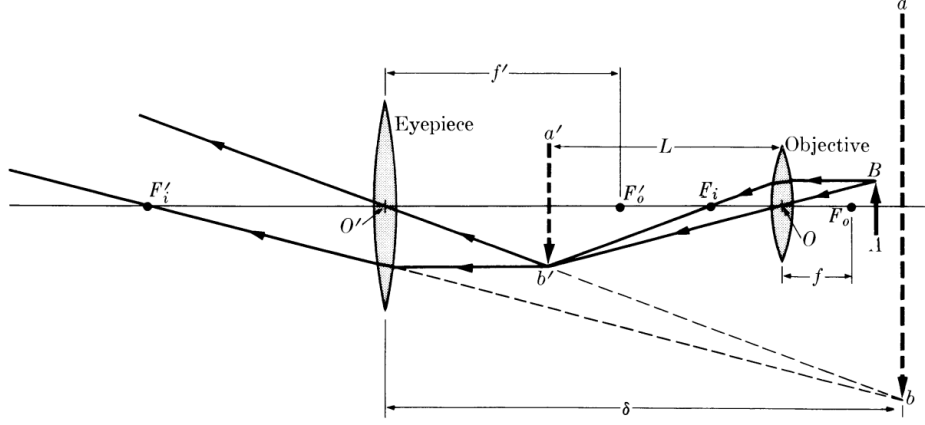


Figura 2: Sistema de lentes de un microscopio.

de la sección 2.1, y tendrá una imagen virtual aumentada. Así, la imagen final ab es aumentada, invertida, y virtual.

La magnificación de la lente objetivo es $M_{\text{objetivo}} = a'b'/AB$. La magnificación de la lente ocular es $M_{\text{ocular}} = ab/a'b'$. En términos de la notación utilizada en la práctica, se tiene $M_{\text{objetivo}} = -d_{i1}/d_{o1}$, $M_{\text{ocular}} = -d_{i2}/d_{o2}$. Así, la magnificación total es:

$$M = M_{\text{objetivo}} M_{\text{ocular}} = \left(-\frac{d_{i1}}{d_{o1}} \right) \cdot \left(-\frac{d_{i2}}{d_{o2}} \right). \quad (3)$$

Se sabe que el sistema $1/d_o + 1/d_i = 1/f$, $d_i + d_o = k$, tiene sólo dos soluciones, que indican dónde se formará una imagen (final, invertida, amplificada) nítida, en el sistema de una sola lente. Además, como se vio en la sección 2.1, cuanto más se acerque la imagen de la lente objetivo, al foco de la lente ocular, es decir, cuando $d_{o2} = f_2$, se tendrá amplificación máxima. El proceso de encontrar la mayor amplificación posible de esta manera, se le llama *enfocar*. El objetivo es montar las lentes de un microscopio compuesto y calcular su amplificación. Se utilizará la convención de signos establecida en [2].

2.3 — Paraleje —

Dado que el cuerpo humano posee dos lentes convergentes (dos ojos), ocurre la siguiente situación geométrica con cada uno de los objetos observados, como lo indica la Figura 3. Esto dice, que no pueden observarse dos objetos al mismo

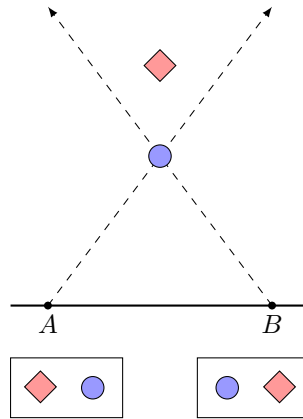


Figura 3: Reflexión de las imágenes en cada uno de los observadores de la imagen.

tiempo con dos lentes diferentes preservando el mismo sentido.

3 METODOLOGÍA.

1. Se utilizaron 2 lentes convergentes convexas con una distancia focal de 100mm y 200mm como lente objetivo y lente ocular respectivamente.
2. La escala de la cinta métrica es $\frac{0.1\text{cm}}{2} = 0.05\text{cm}$.

La Figura 4 muestra la configuración para el dispositivo experimental usado. Se posiciona de manera paralela la pantalla, la lente objetivo y la lente ocular en ese orden mediante la ayuda de un banco óptico.

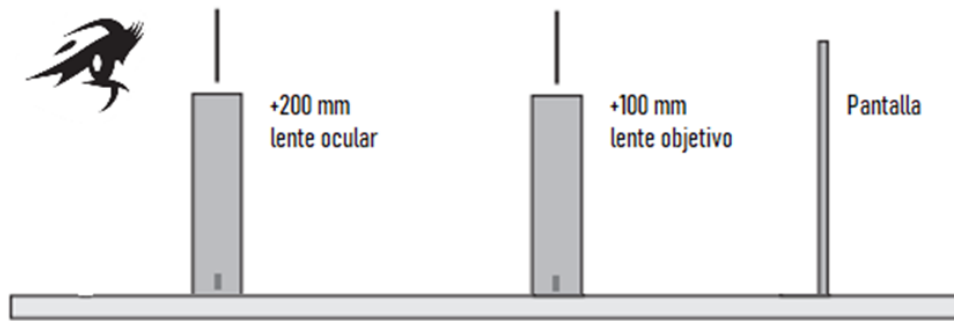


Figura 4: Configuración inicial del dispositivo experimental.

Dado que se requiere construir un microscopio y determinar su magnificación, es necesario poder tener una imagen nítida y referencial para poder medir, para ello, se procedió a poner una hoja cuadriculada en la pantalla como se muestra en la Figuras 5.

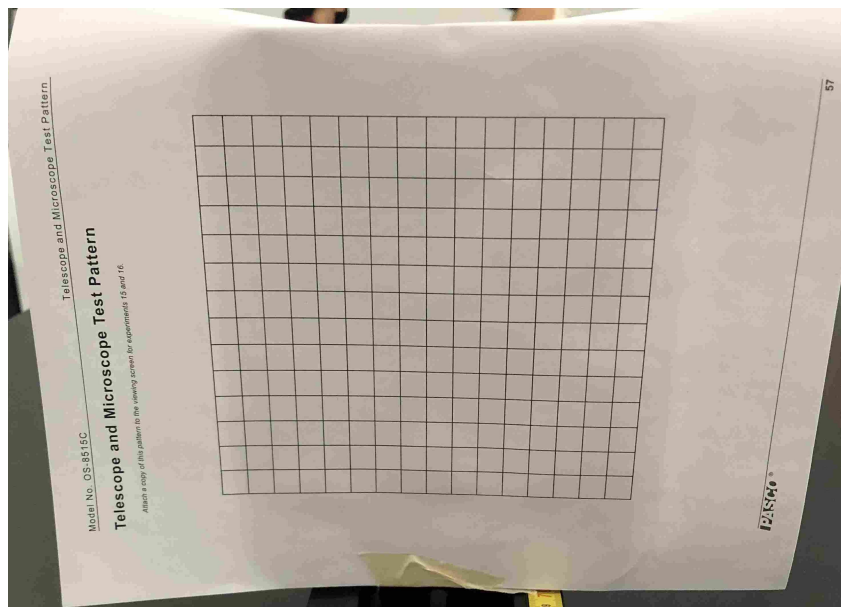


Figura 5: Cuadrícula pegada en la pantalla.

Ahora, moviendo solo la lente objetivo, se logró tener la posición en la que se tuvo una imagen nítida. A continuación, fue necesario mover la lente ocular de tal manera que se pudiese tener una referencia en el aumento sin paralaje, esto es, para alinear se tuvo que trabajar con ambos ojos, uno visualizando la hoja cuadriculada sin el uso de las lentes y el otro visualizando la hoja cuadriculada a través de las lentes, respectivamente el ojo izquierdo y derecho, para poder tener un aproximado en la potencia del microscopio como se muestra en la Figura 6, 7 y 8.

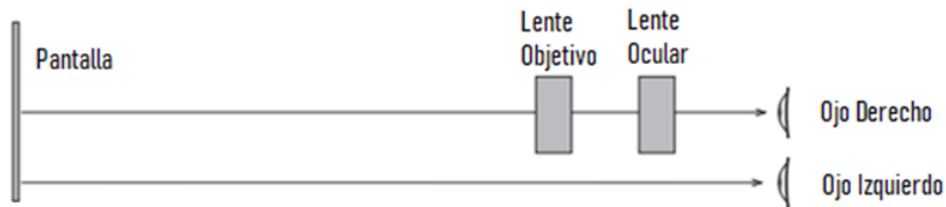


Figura 6: Visualización de objeto e imagen simultáneamente para eliminar paralaje.

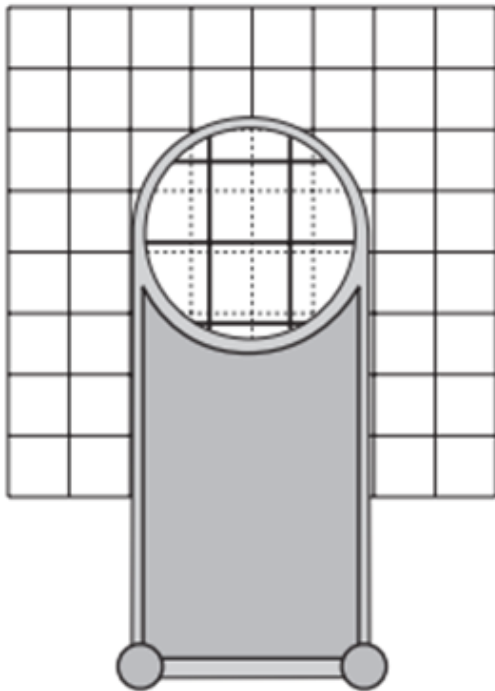


Figura 7: Observación del fenómeno de amplificación del objeto a través de las lentes.



Figura 8: Vista de la Figura 6 con la configuración del dispositivo experimental.

Al tener todo posicionado de tal manera que se tenga una imagen nítida y referencial a la magnificación de la lente se procedió a registrar las posiciones sobre el banco óptico a la que se encontraba la pantalla y las lentes, además de la magnificación observada del microscopio.

4 RESULTADOS.

Los resultados obtenidos al realizar el experimento fueron los siguientes (ver Tabla 1). El cálculo de éstos valores se encuentra en la sección 7. Los primeros 5 datos de la Tabla 1, fueron obtenidos experimentalmente.

Tabla 1: Resultados obtenidos de las mediciones.

Posición de la lente objetivo	$(43.15 \pm 0.05)cm$
Posición de la lente ocular	$(14.85 \pm 0.05)cm$
Posición de la pantalla	$(70 \pm 0.05)cm$
Magnificación observada	2
d_{o1}	$(26.85 \pm 0.05)cm$
d_{i2}	$(-32.3916 \pm 0.2871)cm$
d_{i1}	$(15.9347 \pm 0.0769)cm$
d_{o2}	$(12.3652 \pm 0.1769)cm$
Magnificación calculada	-1.5546 ± 0.0464
Error absoluto	$ 2 - 1.5546 = 0.4453$

El trazo de rayos con los datos obtenidos queda en la Figura 9.

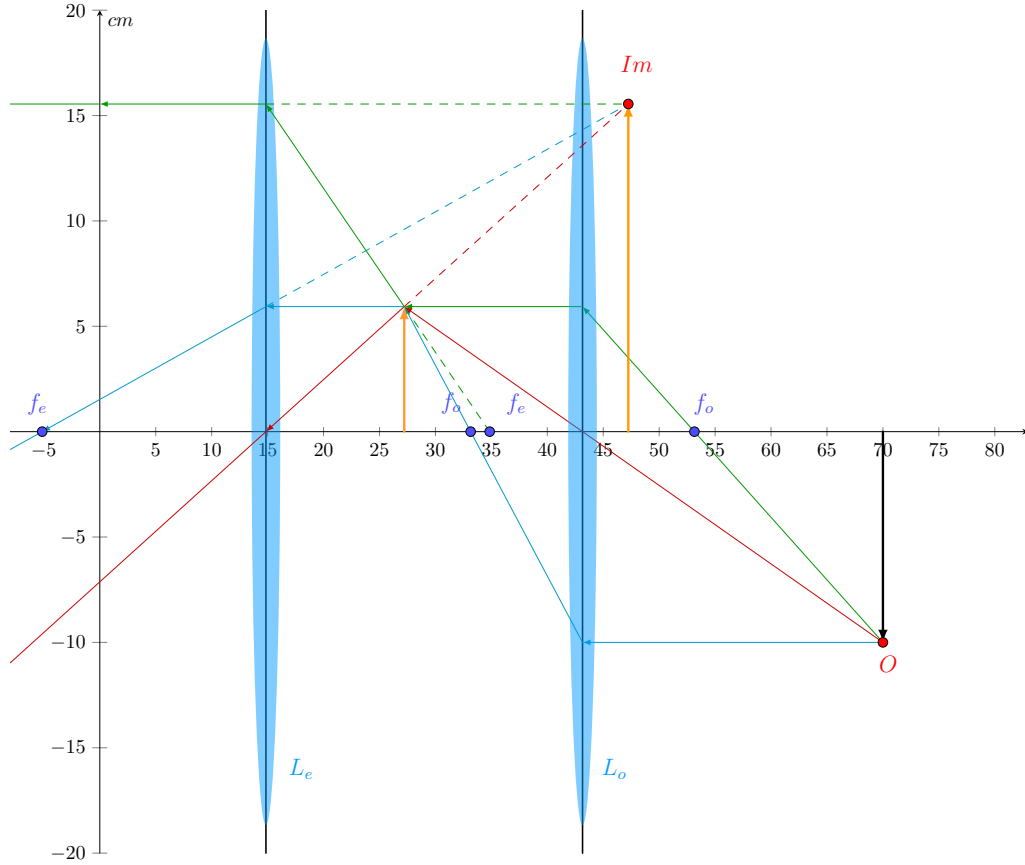


Figura 9: Trazado de rayos para el microscopio con las condiciones del laboratorio.

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En el desarrollo del experimento al momento de tener el ajuste de las lentes para tener la imagen nítida eliminando paralaje, pudimos estimar el valor de la magnificación de (2), lo que significa que al estar viendo mediante el ojo derecho la cuadrícula a través de las lentes, y con el ojo izquierdo la cuadrícula original, se pudo observar que visto desde el microscopio, un cuadrado de la cuadrícula contiene a 2 cuadros de la rejilla observada para el objeto óptico.

En la parte analítica se obtuvo un valor de magnificación para el microscopio de -1.5546 ± 0.0464 con lo cual observamos que, en primera instancia, los valores entre lo observado y lo estimado indican que la imagen se encuentra derecha o invertida respectivamente. Por otro lado, al analizar la teoría de lentes delgadas, vemos que ambas lentes del experimento, siendo convexas y convergentes, provocan una imagen final que es invertida respecto al objeto. Adentro de la cuadrícula no hay un sentido de imagen derecha o imagen invertida por lo que fue natural dar la magnificación como un valor positivo; para corregir esto se pudo haber marcado la cuadrícula, de tal forma que las líneas verticales se les designara un sentido al marcarlas con flechas (ejemplo, un campo vectorial) para evitar problemas con el paralaje y la orientación, de esta manera se hubiese podido ver claramente a través de las lentes una imagen invertida con respecto al objeto pantalla reafirmando directamente lo analizado en la teoría para lentes delgadas.

Es necesario hacer la observación de que la calidad de las lentes no era la mejor, ya que para la Figura 9, la cual constituye al trazado de rayos del modelo experimental, no coincide la imagen con el objeto pantalla. La teoría no falla, pero dada nuestra poca experiencia para decidir el enfoque de las lentes, implicó tener un margen de error de tal manera que la distancia final entre la imagen y la pantalla fue de $(22.7584 \pm 0.3371)cm$. Lo ideal hubiese sido haber elaborado el trazado de rayos al momento de elaborar el experimento, para verificar si la imagen deseada estuviese efectivamente posicionada en la pantalla, por lo que también es de esperarse que el valor estimado visualmente de la magnificación no fue obtenido de buena manera por lo argumentado anteriormente con respecto a la posición de la imagen y la pantalla.

Sin embargo, al final fue posible analizar el funcionamiento del microscopio tanto de manera práctica así como de manera teórica, y por ambos caminos se pudo estimar la magnificación en la imagen de este instrumento óptico, comparar tales valores, y comprobar que, efectivamente, el microscopio es útil para visualizar de manera ampliada los objetos.

6 REFERENCIAS.

- 1 Marcelo Alonso Edward J. Finn. *Fundamental University Physics II Fields And Waves*. Addison-Wesley Series In Physics. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.
- 2 Raymond A. Serway; Ana Elizabeth García Hernández; Chris Vuille; Ernesto Filio López. *Fundamentos de física. vol. 2*. Cengage Learning, novena edición. edition, 2013.
- 3 John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, 2nd edition, 1997.

7 APÉNDICE.

De la fórmula de lentes delgadas se sabe que

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}$$

Despejando d_i se tiene: $d_i = \frac{d_o \cdot f}{d_o - f}$. Consúltense [3] para obtener que la incertidumbre para la suma, el producto y un cociente están dadas (respectivamente) por

$$(x \pm \delta x) \pm (y \pm \delta y) = (x \pm y) \pm (\delta x + \delta y)$$

$$(x \pm \delta x)(y \pm \delta y) = x \cdot y \pm (|y|\delta x + |x|\delta y)$$

$$\frac{x \pm \delta x}{y \pm \delta y} = \frac{x}{y} \pm \left(\frac{\delta x}{|y|} + |x| \frac{\delta y}{|y|^2} \right)$$

Haciendo los cálculos para d_{i1}

$$\begin{aligned} d_{o1} \cdot f_1 &= [(26.85 \pm 0.05)cm](10cm) = \\ &= [(26.85 \cdot 10) \pm (0.05 \cdot 20)]cm^2 = \\ &= (268.5 \pm 0.5)cm^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{o1} - f_1 &= [(26.85 \pm 0.05)cm] - (10cm) = \\ &= (16.85 \pm 0.05)cm \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} d_{i1} &= \frac{d_{o1} \cdot f_1}{d_{o1} - f_1} = \\ &= \frac{(268.5 \pm 0.5)cm^2}{(16.85 \pm 0.05)cm} = \\ &= \left[\frac{268.5}{16.85} \pm \left(\frac{0.5}{16.85} + 268.5 \cdot \frac{0.05}{16.85^2} \right) \right] cm = \\ &= (15.9347 \pm 0.0769)cm \end{aligned}$$

Ahora, para la distancia objeto con respecto a la lente ocular (L_e), se tiene que

$$\begin{aligned} d_{o2} &= (d_{L_o} - d_{i1}) - d_{L_e} = \\ &= [(43.15 \pm 0.05)cm - (15.9347 \pm 0.0769)cm] - (14.85 \pm 0.05)cm = \\ &= (27.2152 \pm 0.1269)cm - (14.85 \pm 0.05)cm = \\ &= (12.3652 \pm 0.1769)cm \end{aligned}$$

Entonces, ahora haciendo los cálculos para obtener d_{i2}

$$\begin{aligned} d_{o2} \cdot f_2 &= [(12.3652 \pm 0.1769)cm](20cm) = \\ &= [(12.3652 \cdot 20) \pm (0.1769 \cdot 20)] cm^2 = \\ &= (247.304 \pm 3.538)cm^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{o2} - f_2 &= (12.3652 \pm 0.1769)cm - (20cm) = \\ &= (-7.6348 \pm 0.1769)cm \end{aligned}$$

Así pues

$$\begin{aligned}
 d_{i2} &= \frac{d_{o2} \cdot f_2}{d_{o2} - f_2} = \frac{(247.304 \pm 3.538)cm^2}{(-7.6348 \pm 0.1769)cm} = \\
 &= \left[\frac{247.304}{-7.6348} \pm \left(\frac{3.538}{7.6348} + 247.304 \cdot \frac{0.1769}{7.6348^2} \right) \right] cm = \\
 &= (-32.3916 \pm 0.2871)cm
 \end{aligned}$$

Los cálculos correspondientes para $M1$ son los siguientes

$$\begin{aligned}
 M1 &= -\frac{d_{i1}}{d_{o1}} = -\frac{(15.9347 \pm 0.0769)cm}{(26.85 \pm 0.05)cm} = \\
 &= -\frac{15.9347}{26.85} \pm \left(\frac{0.0769}{26.85} + 15.9347 \cdot \frac{0.05}{26.85^2} \right) = \\
 &= -0.5934 \pm 0.0039
 \end{aligned}$$

Y para $M2$

$$\begin{aligned}
 M2 &= -\frac{d_{i2}}{d_{o2}} = -\frac{(-32.3916 \pm 0.2871)cm}{(12.3652 \pm 0.1769)cm} = \\
 &= -\frac{(-32.3916)}{12.3652} \pm \left(\frac{0.2871}{12.3652} + 32.3916 \cdot \frac{0.1769}{12.3652^2} \right) = \\
 &= 2.6195 \pm 0.0606
 \end{aligned}$$

Con esto, se puede calcular la magnificación total

$$\begin{aligned}
 M_T &= M_1 \cdot M_2 = (-0.5934 \pm 0.0039)(2.6195 \pm 0.0606) = \\
 &= (-0.5934)(2.6195) \pm (0.5934 \cdot 0.0606 + 2.6195 \cdot 0.0039) = \\
 &= -1.5546 \pm 0.0464
 \end{aligned}$$